


Formular cu date practice privind puterea de curățare a produsului KLINOZYME

Klinozyme este un detergent concentrat cu o formulă inovativă bazată pe un mix de surfactanți ce se disting prin proprietăți hidrofile și hidrofobe, ceea ce asigură performanțe împotriva murdăriei proteice și glucide (fără caracter lipic) și a murdăriei lipidice pe de altă, prin mecanism de solubilizare și/sau emulsionare.

În grafic următor este prezentată eficiența produsului în procesul de curățare a unor suprafețe dure, neporoase cu o soluție de 0,5% Klinozyme timp de 5 minute și temperaturi de 30°C, nivel redus de încărcare cu murdărie (grosime strat murdărie nonlipidică 15÷30μm).

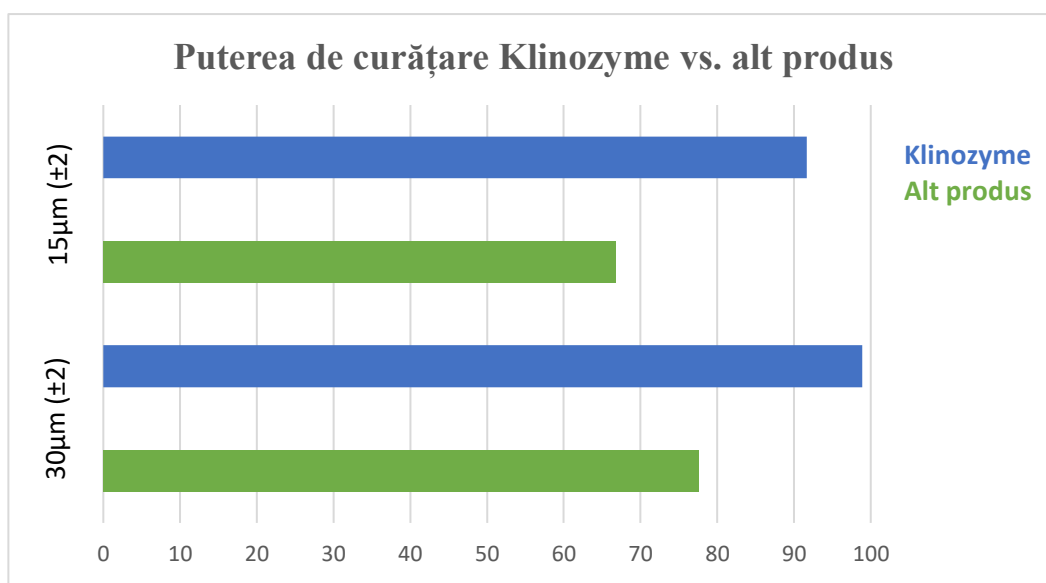

Complexul trienzimatic al produsului Klinozyme contribuie intens la procesul de îndepărtare a reziduurilor de material organic prin mecanisme enzimatică, iar amestecul de surfactanți și degresanți din produs facilitează suspendarea resturilor organice în soluția gata de lucru.